

# Pflegebetten von HESS – zum Wohl von Patient und Personal.



Ein Schweizer Qualitätsprodukt 



*Für Spital, Therapie und Pflege*



Eine wohnliche Atmosphäre, Behaglichkeit und Komfort sind Bedürfnisse älterer Menschen. Diesen Ansprüchen zu genügen ist sehr wichtig, sie haben einen direkten Einfluss auf den physischen und psychischen Zustand des Menschen.

Funktionalität, Zuverlässigkeit, Sicherheit, dazu eine einfache Handhabung sowie ein ansprechendes, wohnliches Design, das sind Anforderungen von Bewohnern, Pflege- und dem Technikpersonal, denen HESS mit seinen Produkten mehr als gerecht wird. Ausserdem sind HESS Pflegebetten Schweizer Qualitätsprodukte mit einem ausgesprochen fairen Preis-/Leistungsverhältnis.

## Unsere Innovationen – Ihre Vorteile

- Matratzen Höhe von 10 – 15 cm einsetzbar
- Seitengitter per Knopfdruck (unten) herausnehmbar
- die Unterfahrbarkeit für einen Lifter beträgt 140 mm
- schnelle Höhenverstellung
- vorbereitet für Bettverlängerung um 20 cm
- mit 99 cm Breite passen die Pflegebetten durch jede Tür (Mindestbreite Türen 1 m)
- weniger Defekte bei Antrieben und Elektronik dank elektronischem Überlastschutz (Antrieb kann nicht mehr überlastet werden)
- Netzstecker auswechselbar – es muss im Schadenfall nicht die gesamte Elektronik gewechselt werden
- servicefreundlich, schnell zu ersetzende Antriebe (jeder Antrieb ist einzeln ersetzbar)
- für HESS-Produkte sind Ersatzteile über die gesetzlichen Mindestanforderungen von 10 Jahren garantiert erhältlich

## Unsere umfassende Basisausstattung

- Holzumrandung in Buche
- 4-teilige Liegefläche mit Holzfederleisten in Buche
- Mittelzonenverstärkung
- automatischer Matratzenausgleich
- stufenlose elektrische Rückenteilverstellung von 0 – 50°
- stufenlose elektrische Beinverstellung 0 – 35°
- manuelle Fussteilverstellung (Rasterverstellung)
- Handschalter mit leichtgängigen Drucktasten
- Innenmass (Matratzengrösse) 90 x 200 cm
- pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion RAL 9006 weiss-aluminium



Mit leistungsstarkem Akku für die gelegentliche Verstellung ohne Stromanschluss



Seitengitter mit Fingerschutz



Hochwertiger Lattenrost



Drucktaste ermöglicht die Abnahme der Seitengitter ohne Werkzeug



Pflegebett CLASSICO



Pflegebett OTTIMO



Pflegebett ESTETTICO



Boden-Pflegebett UNICO



HESS-Pflegebetten erfüllen alle Anforderungen für einen kompromisslosen Komfort für Patient und Personal. Bedienung per Handschalter, stufenlose Höhenverstellung, aussergewöhnlich tiefe Einstiegshöhe, individuelle Liegeflächen-Positionierung und Fahrbarkeit gehören bei uns ebenso dazu wie höchste Stabilität in allen Positionen. Die zeitlosen Holzumrandungen tragen zu einem wohnlichen Ambiente bei. Und auf Wunsch sind unsere Betten mit einer Komfortstellung erhältlich.

Die CLASSICO-Reihe ist vor allem für den klassischen Pflegebereich konzipiert. Individuell ausrüstbar mit cleveren Details lässt sich das Bett ganz auf die Bedürfnisse von Patient und Personal ausrüsten.

## HESS Pflegebett CLASSICO

- Höhenverstellbereich 51 cm, von 29–80 cm
- vorbereitete Bettverlängerung um 20 cm
- neueste Antriebstechnologie mit hoher Verstellgeschwindigkeit
- integrierter Akku für den Notbetrieb (bei Stromausfall kann das Bett weiterhin verstellt werden)
- Federleisten in Buche, Lattenrost silber speziallackiert, hygienisch, schmutzabweisend, antirutsch-behandelt
- Rollen Ø 100 mm
- Zentral-Totalblockierung
- fahrbar in jeder Position
- Aussenmasse Länge 205 cm, Breite 99 cm
- sichere Arbeitslast 200 kg

Artikel	Art.-Nr.
<b>CLASSICO</b>	<b>H20-500.03</b>

Zubehör siehe Seiten 12 + 13

## HESS Pflegebett CLASSICO mit Komfortstellung

- Höhenverstellbereich 51 cm, von 29–80 cm
- Komfortstellung, Bein- und Kopfteil werden automatisch eingestellt
- vorbereitete Bettverlängerung um 20 cm
- neueste Antriebstechnologie mit hoher Verstellgeschwindigkeit
- integrierter Akku für den Notbetrieb (bei Stromausfall kann das Bett weiterhin verstellt werden)
- Federleisten in Buche, Lattenrost silber speziallackiert, hygienisch, schmutzabweisend, antirutsch-behandelt
- Rollen Ø 100 mm
- Zentral-Totalblockierung
- fahrbar in jeder Position
- Aussenmasse Länge 205 cm, Breite 99 cm
- sichere Arbeitslast 180 kg

Artikel	Art.-Nr.
<b>CLASSICO mit Komfortstellung</b>	<b>H20-500.13</b>

Zubehör siehe Seiten 12 + 13



Rollen mit 100 mm Durchmesser



Saubere Verarbeitung



Automatischer Matratzenausgleich



Bedienerfreundlichkeit im Detail: die Seitengitter sind ohne Werkzeuge abnehmbar.



CE-Kennzeichnung des gesamten Bettes. Erfüllung aller Anforderungen nach Medizinprodukt-Verordnung (MepV).



Hygienisch bis unter die Matratze: der Lattenrost ist silber speziallackiert und schmutzabweisend.



Unsere Pflegebetten sind sicher, zuverlässig, stabil und langlebig. Der geräuscharme, kräftige und sehr schnelle Antrieb sorgt für ein angenehmes und wirtschaftliches Arbeiten. Das ermöglicht exakte Manipulationen – und Sicherheit für die Patienten.

Die OTTIMO-Reihe ist vor allem für hohe Beweglichkeit und Verfahrbarkeit des Bettes in jeder Position bestimmt. Auf seinen grossen Rollen ist das OTTIMO Pflegebett gegen Hindernisse am Boden bestens gewappnet.

### HESS Pflegebett OTTIMO

- Höhenverstellbereich 51 cm, von 31–82 cm
- vorbereitete Bettverlängerung um 20 cm
- neueste Antriebstechnologie mit hoher Verstellgeschwindigkeit
- integrierter Akku für den Notbetrieb (bei Stromausfall kann das Bett weiterhin verstellt werden)
- Federleisten in Buche, Lattenrost silber speziallackiert, hygienisch, schmutzabweisend, antirutsch-behandelt
- Rollen Ø 125 mm
- Zentral-Totalblockierung mit Richtungsfeststeller
- fahrbar in jeder Position
- Aussenmasse Länge 205 cm, Breite 99 cm
- sichere Arbeitslast 200 kg

Artikel	Art.-Nr.
<b>OTTIMO</b>	<b>H20-500.01</b>
Zubehör siehe Seiten 12 + 13	

**Eingebauter Überlastungsschutz:**  
Defekte durch eine mögliche Überlastung der Antriebe werden durch die Elektronik verhindert.



### HESS Pflegebett OTTIMO mit Komfortstellung

- Höhenverstellbereich 51 cm, von 31–82 cm
- Komfortstellung, Bein- und Kopfteil werden automatisch eingestellt
- vorbereitete Bettverlängerung um 20 cm
- neueste Antriebstechnologie mit hoher Verstellgeschwindigkeit
- integrierter Akku für den Notbetrieb (bei Stromausfall kann das Bett weiterhin verstellt werden)
- Federleisten in Buche, Lattenrost silber speziallackiert, hygienisch, schmutzabweisend, antirutsch-behandelt
- Rollen Ø 125 mm
- Zentral-Totalblockierung mit Richtungsfeststeller
- fahrbar in jeder Position
- Aussenmasse Länge 205 cm, Breite 99 cm
- sichere Arbeitslast 180 kg

Artikel	Art.-Nr.
<b>OTTIMO mit Komfortstellung</b>	<b>H20-500.11</b>
Zubehör siehe Seiten 12 + 13	

**CE**

CE-Kennzeichnung des gesamten Bettes. Erfüllung aller Anforderungen nach Medizinprodukt-Verordnung (MepV).



Rollen mit 125 mm Durchmesser



Bettverlängerung um 20 cm



Aufzugsbügel am Kopfende links oder rechts montierbar

**Keine bösen Überraschungen:**  
durch den Einsatz der neuesten Elektronik kann das Pflegebett überwacht werden.

Keine Kompromisse

# ESTETTICO stand sicher und in der Höhe extrem flexibel



Mit der HESS-Pflegebetten-Linie haben wir für jeden Einsatz die richtige Lösung. Alle Modelle verfügen über eine umfangreiche Basisausstattung und können auf ganz individuelle Bedürfnisse abgestimmt zusammengestellt werden. So entsteht ein optimales Arbeitsinstrument, ohne Kompromisse für den Patienten und Pflegepersonal eingehen zu müssen.

Die ESTETTICO-Reihe ist vor allem für klassische Objekteinrichtungen konzipiert. Eine schöne Form, die geschickt die Funktionalität für einen Notfall verborgen hält.

## HESS Pflegebett ESTETTICO

- Höhenverstellbereich 51 cm, von 29–80 cm
- vorbereitete Bettverlängerung um 20 cm
- neueste Antriebstechnologie mit hoher Verstellgeschwindigkeit
- integrierter Akku für den Notbetrieb (bei Stromausfall kann das Bett weiterhin verstellt werden)
- Federleisten in Buche, Lattenrost silber speziallackiert, hygienisch, schmutzabweisend, antirutsch-behandelt
- Rollen Ø 50 mm, Rollenabdeckung Ø 153 mm
- Zentralblockierung je Achse
- fahrbar in jeder Position
- Aussenmasse Länge 205 cm, Breite 99 cm
- sichere Arbeitslast 200 kg

Artikel	Art.-Nr.
ESTETTICO	H20-500.02

Zubehör siehe Seiten 12 + 13

## HESS Pflegebett ESTETTICO mit Komfortstellung

- Höhenverstellbereich 51 cm, von 29–80 cm
- Komfortstellung, Bein- und Kopfteil werden automatisch eingestellt
- vorbereitete Bettverlängerung um 20 cm
- neueste Antriebstechnologie mit hoher Verstellgeschwindigkeit
- integrierter Akku für den Notbetrieb (bei Stromausfall kann das Bett weiterhin verstellt werden)
- Federleisten in Buche, Lattenrost silber speziallackiert, hygienisch, schmutzabweisend, antirutsch-behandelt
- Rollen Ø 50 mm, Rollenabdeckung Ø 153 mm
- Zentralblockierung je Achse
- fahrbar in jeder Position
- Aussenmasse Länge 205 cm, Breite 99 cm
- sichere Arbeitslast 180 kg

Artikel	Art.-Nr.
ESTETTICO mit Komfortstellung	H20-500.12

Zubehör siehe Seiten 12 + 13



Abgedeckte Rollen 153 mm Durchmesser



Hochwertige Rasterelemente



Kopf- und Fussteil individuell einstellbar

Stark und zuverlässig: weniger Reparaturen durch leistungsstarke und gut dimensionierte Antriebe.



Tagein, tagaus, rauf und runter: die durchdachte Mechanik garantiert eine reibungslose Funktionalität des Bettes.

CE

CE-Kennzeichnung des gesamten Bettes. Erfüllung aller Anforderungen nach Medizinprodukt-Verordnung (MepV).

# UNICO unser Bett mit grossem Tiefgang



Dank des innovativen Höhenverstellsystems kann das Bodenpflegebett UNICO elektrohydraulisch bis auf eine Pflegehöhe von 73 cm (ohne Matratze) hochgefahren werden. Mit einer Einstiegshöhe von nur 18 cm wird das Sturzrisiko enorm reduziert.

Das Bodenpflegebett UNICO besticht durch absolute Stabilität, individuelle Liegeflächenpositionierung und Matratzenausgleich. Die totale Unterfahrbarkeit erlaubt problemlose Transfers mit allen gängigen Patientenliftern. In der untersten Position ist das Bodenpflegebett UNICO fahrbar.

HESS Medizintechnik AG geht mit der Neuentwicklung vom Bodenpflegebett UNICO neue Wege. Dank intensivem Kontakt zu unseren Kunden konnten wir ein komplett neuartiges und multi-funktionelles Bodenpflegebett verwirklichen. Komfort und Sicherheit sind völlig neu definiert und optimal einsetzbar in Demenz-, Palliative-, Neurologie- und Psychiatrie-Abteilungen.

Echt innovativ – echte Schweizer Qualität.

Leise und kraftvoll: durch das moderne elektrohydraulische Höhenverstellsystem wird das Bett praktisch geräuschlos in die richtige Position bewegt.



Im Bedarfsfall auch mobil: an unterster Position auf Rollen fahrbar.



CE-Kennzeichnung des gesamten Bettes. Erfüllung aller Anforderungen nach Medizinprodukt-Verordnung (MepV).

## HESS Bodenpflegebett UNICO

- Höhenverstellbereich 55 cm, von 18–73 cm
- 4-teilige Liegefläche
- Federleisten in Buche
- automatischer Matratzenausgleich
- totale Unterfahrbarkeit
- geräuschlose elektrohydraulische Antriebe
- Doppellenkrollen Ø 75 mm
- fahrbar an unterster Position
- Aussenmasse Länge 213 cm, Breite 99 cm
- sichere Arbeitslast 150 kg
- Holzverkleidung in Buche
- Aluminium-, Stahlkonstruktion pulverbeschichtet (RAL 7035 lichtgrau)

Artikel

Art.-Nr.

**UNICO Bodenpflegebett**

**H21-100.01**

Zubehör siehe Seiten 12 + 13



Die niedrige Einstiegshöhe von 18 cm unterstützt die erforderliche Sturzprophylaxe



Saubere Verarbeitung



Einfache Bedienung



Totale Unterfahrbarkeit

# Optionen

## zu Pflegebetten




HESS Medizintechnik AG bietet zu ihren Produkten eine Vielzahl Optionen und Zubehör an. So ist gewährleistet, dass die Pflegebetten genau auf die ganz individuellen Bedürfnisse von Patienten und Personal zugeschnitten sind. Selbstverständlich können unsere Betten auch nachträglich noch ausgerüstet werden.



Artikel Art.-Nr.  
**Handtuchhalter**  
aus Edelstahl **H20-501.07**



Artikel Art.-Nr.  
**Urinflaschenhalter** **H20-501.08**

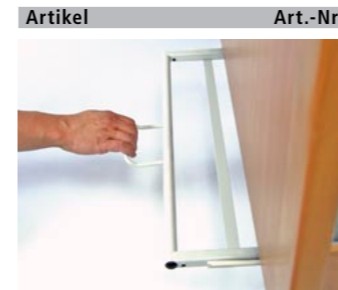

Artikel Art.-Nr.  
**Bettedeckenhalter**  
ausziehbar **H20-501.06**




Artikel Art.-Nr.  
**Seitengitter-Erhöhung 18 cm**  
zur Fixierung auf höhenverstellbare  
Seitengitter, links/rechts  
montierbar **H20-501.09**



Artikel Art.-Nr.  
**Seitengitterpolster**  
zur Fixierung auf höhenverstellbare  
Seitengitter, links/rechts  
montierbar **H20-501.10**



Artikel Art.-Nr.  
**Mobilitätsgriff**  
Ein- und Ausstieghilfe  
für Bettbenutzer  
vom Kopf aus gesehen  
links montiert **H20-501.04**  
vom Kopf aus gesehen  
rechts montiert **H20-501.16**

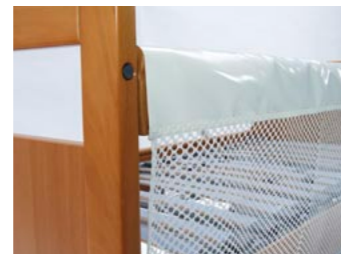

Artikel Art.-Nr.  
**Textilseitennetz** **H20-501.14**




Artikel Art.-Nr.  
**Aufrichter**  
mit Haltegriff **H20-501.02**



Artikel Art.-Nr.  
**Aufrichter**  
Haltegriff  
mit Aufrollautomatik **H20-501.03**



Artikel Art.-Nr.  
**Sperrbox**  
zur Unterbrechung der elektro-  
motorischen Verstellung **H20-501.13**

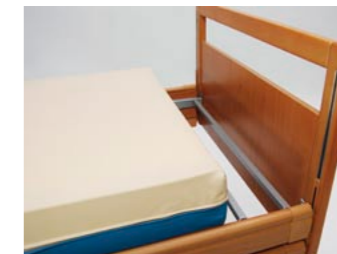


Artikel Art.-Nr.  
**Bettverlängerungsset**  
für Liegeflächenverlängerung um 20 cm  
bestehend aus:  
– Liegerahmenverlängerung  
– verlängerte Seitengitter  
– Holzblende  
beim Liegerahmen **H20-501.11**



Artikel Art.-Nr.  
**Matratzeinsatz**  
mit Schutzbezug **H20-350**



Artikel Art.-Nr.  
**Wandabstandhalter**  
verhindern Beschädigungen  
von Bett und Wand **H20-501.05**

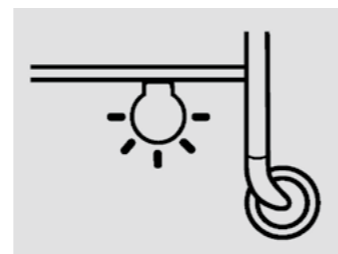

Artikel Art.-Nr.  
**Unterbett-  
beleuchtung** **H20-501.12**



Artikel Art.-Nr.  
**Bettenrolli**  
paarweise **H20-501.15**



Artikel Art.-Nr.  
**Bettüberwachung** **H20-501.01**

## zu Bodenpflegebett UNICO



Artikel Art.-Nr.  
**Textilseitennetz** **H21-202**



Artikel Art.-Nr.  
**Seitengitter**  
extra hoch, Aluminium  
paarweise **H21-201.01**




Artikel Art.-Nr.  
**Holzseitengitter**  
Buche hell, paarweise **H21-200.01**



Artikel Art.-Nr.  
**Aufrichter**  
mit Haltegriff **H21-203**



Artikel Art.-Nr.  
**Bettenrolli**  
paarweise **H21-204**

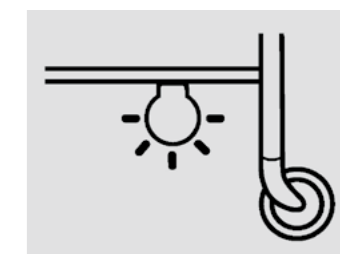

Artikel Art.-Nr.  
**Unterbettbeleuchtung** **H21-205**



Neben unseren Pflegebetten-Linien führen wir selbstverständlich auch das passende Zubehör-Sortiment von namhaften Herstellern sowie Eigenprodukte. Für uns gehört eine umfassende und zweckmässige Einrichtung zu einer würdigen Betreuung der Pflegebedürftigen ebenso dazu wie funktionelles Inventar für das Pflegepersonal.



Artikel	Art.-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
<b>Nachtschrank Arabis</b> beidseitig bedienbar		45 cm	49 cm	75 cm
1 Schublade 1 Fach durchgehend offen 1 Auszug Dekor Buche				<b>H20-220</b>



Artikel	Art.-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
<b>Nachtschrank Admiral</b> mit integriertem Esstisch		56 cm	45 cm	85 cm
32 x 58 cm, höhenverstellbar beidseitig bedienbar				<b>H20-221</b>
1 Schublade 1 Fach durchgehend offen 2 Klappen Dekor Buche				



Artikel	Art.-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
<b>Nachtschrank Artus</b> mit integriertem Esstisch		54 cm	49 cm	90 cm
38 x 59 cm, beidseitig bedienbar				<b>H20-222</b>
1 Schublade 1 Fach durchgehend offen 1 Flügeltür mit Einlegeboden Dekor Buche				



Artikel	Art.-Nr.
<b>Qualitätsmatratzen</b> in diversen Ausführungen und Grössen	<b>H20-MATRATZE</b>



Artikel	Art.-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
<b>Bett-Tischli</b>		77 cm	43 cm	76 - 116 cm
				<b>H03-111</b>



Artikel	Art.-Nr.
<b>Leseleuchte (Kompaktleuchtstofflampe)</b> blendfreies Leselicht, geringe Wärmeentwicklung, federentlastetes Armsystem mit Wippschalter	<b>H20-179</b>



Artikel	Art.-Nr.
<b>Leseleuchte (LED Modul)</b> blendfreies Leselicht, keine Wärmestrahlung, homogenes Lichtfeld, flexibler Arm (Schwanenhals) mit Drehgelenk	<b>H20-180</b>



Artikel	Art.-Nr.
<b>Nachtisch-Adapter</b> passend zu Halterung am Nachttisch, mit Auszugs- sicherung	<b>H20-176.001</b>



Artikel	Art.-Nr.
<b>Halterung für Bettleuchte</b> paarweise	<b>H20-166</b>



Artikel	Art.-Nr.
<b>Stuhl Pablo</b> mit hoher Rückenlehne und Armauflage, massives Buchenholz, Rückenhöhe ab Sitzfläche ca. 50 cm, Polsterüberzug nach Musterkollektion	<b>H20-110.01</b>



Artikel	Art.-Nr.
<b>Stuhl Erica</b> mit hoher Rückenlehne, massives Buchenholz, Rückenhöhe ab Sitzfläche ca. 50 cm, Polsterüberzug nach Musterkollektion	<b>H20-110.02</b>




Artikel	Art.-Nr.
<b>Stuhl Luca</b> mit Rückenlehne und Armauflage, massives Buchenholz, Rückenhöhe ab Sitzfläche ca. 40 cm, Polsterüberzug nach Musterkollektion	<b>H20-110.03</b>



Artikel	Art.-Nr.
<b>Stuhl Aurora</b> mit Rückenlehne, massives Buchenholz, Rückenhöhe ab Sitzfläche ca. 40 cm, Polsterüberzug nach Musterkollektion	<b>H20-110.04</b>



Artikel	Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe
<b>Tisch Rio</b> Buchenholz		140 cm	80 cm	76 cm
andere Masse auf Anfrage	<b>H20-111.01</b>			

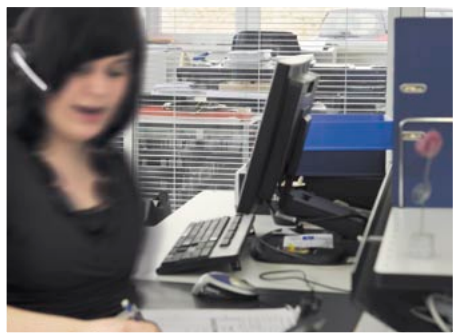


## Dienstleistung

Dienst am Kunden schafft Vertrauen. Kundenservice und Zuverlässigkeit heben die HESS Medizintechnik AG denn auch seit Jahrzehnten von vergleichbaren Firmen ab. Besonders viel Wert legt HESS auf die intensive Weiterbildung aller Mitarbeitenden im Innen- und Aussendienst, damit den Kunden bereits bei der Beratung ein fundierter Service geboten werden kann. Telefonisch stehen kundenfreundliche Mitarbeiter selbstverständlich mit Support und Beratung zur Verfügung.



## Service

Als Entwickler, Hersteller und Händler qualitativ hochwertiger medizintechnischer Produkte für Spital, Therapie und Pflege ist die HESS Medizintechnik AG auch ein kompetenter Partner für Service- und Dienstleistungen rund um die Instandhaltung und Prüfung nach der Medizinprodukteverordnung (MepV). Für unsere Eigen- wie auch für Handelsprodukte gewährleisten unsere qualifizierten Service-Techniker eine termingerechte und professionelle Abwicklung.

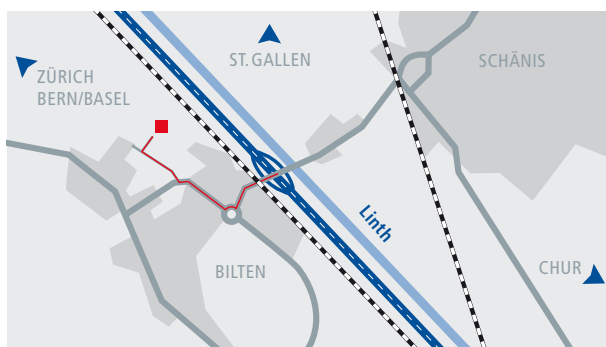

HESS Medizintechnik AG  
Grabenstrasse 14, Industrie West  
CH-8865 Bilten  
Telefon +41 (0)55 619 20 80  
info@hess-med.ch

[www.hess-med.ch](http://www.hess-med.ch)



*Für Spital, Therapie und Pflege*