

# Transport- Stretcher

**Hochklappbares fünftes Rad für  
bessere Mobilität**

**Brems- und Lenkpedale an allen vier  
Seiten ermöglichen der Pflegekraft ein  
flexibles Arbeiten**

**Herunterklappbare Seitengitter tragen  
zur Patientensicherheit bei**

**Optionale Fußteilverstellung für mehr  
Patientenkomfort**




## Leichter Patiententransport

Das einfache Design des Stryker-Transportstretchers bietet sicheren und effizienten Transport zum günstigen Preis. Dieser Stretcher ist mit Mobilität durch das fünfte Rad ausgestattet, um bessere Traktion und leichteres Manövrieren um Ecken zu ermöglichen. Er weist außerdem Zentral Bremsen an vier Laufrollen auf, was für optimale Stabilität sorgt.



Der Transportstretcher von Stryker ist ganz auf den schnellen und effizienten Patiententransport ausgelegt.

Optionen für die Akzentfarbe

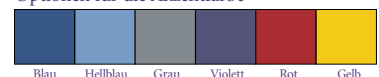

Blau    Hellblau    Grau    Violett    Rot    Gelb

# Transport- Stretcher

stryker®



## Standardfunktionen

- 8 cm dicke Vinylmatratze auf 66 cm breiter Liegefläche
- 8 cm dicke Matratze mit erhöhtem Komfort auf 76 cm breiter Liegefläche
- Omni Surface-Laufrollen, 20 cm
- Klappbare Seitengitter auf 66 cm breiter Liegefläche (zum Fußteil hin klappbar)
- Klappbare Seitengitter auf 76 cm breiter Liegefläche (zum Kopfteil hin klappbar)
- Vier Halterungen für Infusionsständer
- Zentral verriegelndes Bremssystem an vier Laufrollen mit Aktivator an beiden Enden
- Integriertes Staufach mit Sauerstoffflaschenhalterung
- Lenkung mit hochklappbarem fünftem Rad
- Rollenstoßfänger
- Feststehende Liegefläche am Fußende
- Rückenlehne mit zwei Pneumatikzylindern
- Zweifache Hydraulik am Fahrgestell
- An zwei Seiten montierte Fußsteuerungshydraulik
- Trendelenburg-Position mit Freihandbetätigung
- Radabdeckung

## Optionale Funktionen

- Matratze mit erhöhtem Komfort, 10 cm
- Ultrakomfort-Matratze, 10 cm
- Ultrakomfort-Matratze, 13 cm
- Defibrillatortablett
- Defibrillatortablett/Fußstütze/Verlängerung
- Fußstütze/Dokumenthalterung
- Brems- und Lenkpedale an allen vier Seiten
- Ausklappbare Schiebegriffe
- Rollbarer Infusionsständer

## Spezifikationen

	Liegefläche, 66 cm (26")		Liegefläche, 76 cm (30")	
• <b>Modellnummer</b>	747		748	
• <b>Gesamtlänge</b>	221 cm	(83")	221 cm	(83")
• <b>Gesamtbreite</b>	76 cm	(30")	86 cm	(34")
• <b>Gewichtskapazität</b>	228 kg	(500 lbs.)	228 kg	(500 lbs.)
• <b>Höhenbereich (bis Oberkante Liegefläche)</b>				
Hoch	91 cm	(36")	91 cm	(36")
Niedrig	55 cm	(21.5")	55 cm	(21.5")
• <b>Positionierung der Liegefläche</b>				
Rückenlehne	0°- 90°		0°- 90°	
Trend./Anti-Trend.	±18°		±18°	
Fußteilverstellung			0°- 30°	
• <b>Patientenoberfläche</b>	66 cm x 192 cm	(26" x 75.5")	76 cm x 192 cm	(30" x 75.5")
• <b>Seitengitter</b>	33 cm x 140 cm	(13" x 55")	33 cm x 140 cm	(13" x 55")
• <b>Laufrollendurchmesser</b>	20 cm	(8 po.)	20 cm	(8 po.)

Stryker behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

## Herstellergarantie

- Ein Jahr auf Ersatzteile, Reparatur- und Anfahrtskosten

### Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Mitarbeiter im Gesundheitswesen.

Der Chirurg muss stets nach eigenem klinischen Ermessen entscheiden, ob ein bestimmtes Produkt zur Behandlung eines bestimmten Patienten geeignet ist. Stryker gibt keinerlei medizinische Ratschläge und empfiehlt, dass Chirurgen in der Verwendung eines bestimmten Produktes unterwiesen werden sollten, bevor sie dieses während einer Operation einsetzen.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu gedacht, das gesamte Spektrum des Produktangebots von Stryker zu präsentieren. Der Chirurg muss sich vor dem Gebrauch aller Stryker-Produkte stets mit der Packungsbeilage, dem Produktetikett bzw. der Gebrauchsanweisung vertraut machen.

Manche Produkte sind nicht in allen Ländern erhältlich. Die Verfügbarkeit hängt von den behördlichen Auflagen bzw. Gepflogenheiten des jeweiligen Marktes ab. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrer Region an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation bzw. ihre Geschäftsbereiche oder Tochterfirmen besitzen oder benutzen die folgenden Marken oder geschützten Bezeichnungen für Dienstleistungen bzw. haben entsprechenden Schutz beantragt: **Big Wheel**, **Omni Surface** und **Stryker**. Alle anderen genannten Marken sind Marken des jeweiligen Eigentümers bzw. Markeninhabers.

Die oben aufgeführten Produkte tragen das CE-Kennzeichen nach der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG.

### Deutschland

Stryker GmbH & Co. KG  
Dr.-Homer-Stryker-Platz 1  
47228 Duisburg

t: +49 2065 837-0  
f: +49 2065 837-837  
www.stryker.de



Literaturnummer: **MTX6101252005DE**  
MTX6706/GS 06/10

Copyright © 2010 Stryker

### Österreich

Stryker GmbH  
Euro Plaza, Gebäude G  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien

t: +43 1 813 2000  
f: +43 1 813 1616  
www.stryker.at

### Schweiz

Stryker Osteonics SA  
Dr. Homer Stryker Strasse 1  
2545 Selzach

t: +41 32 641 6-950  
f: +41 32 641 6-955  
www.stryker.ch