


Zubehör accessories

sita Variationsliege sita variation lounge

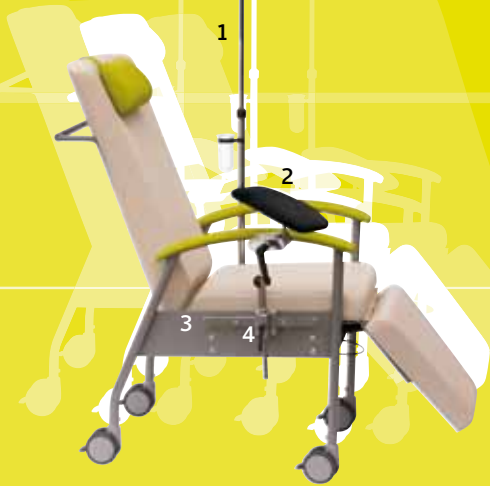

1 Infusionsständer mit Halter infusion stand with holder	Art. Nr. p/n	4303208
2 Armauflage zur Blutabnahme, 1 Stück arm rest for blood withdrawal, 1 item	Art. Nr. p/n	4301100
3 Normschiene, seitlich, 1 Paar lateral standard bars, 1 pair	Art. Nr. p/n	4490100
4 Halter für Blutabnahme, 1 Stück holder for blood withdrawal arm rest, 1 item	Art. Nr. p/n	4871400
5 Patiententisch mit Halter patient table with holder	Art. Nr. p/n	4492200
Klarsichtschutz für Bei naufgabe transparent protective cover for leg rest	Art. Nr. p/n	1414490

sita technische Daten technical data

Gesamtbreite (ohne Zubehör) overall width (without accessories)	ca.	63 cm
Gesamttiefe in Sitzposition overall depth in sitting position	ca.	82 cm
Gesamthöhe (ohne Zubehör) overall height (without accessories)	ca.	126 cm
Sitzbreite seat width	ca.	50 cm
Sitztiefe seat depth	ca.	49 cm
Sitzhöhe seat height	ca.	55 cm
Liegefläche surface	ca.	185 x 50 cm
max. Patientengewicht max. weight of patient	ca.	150 kg
Gewicht weight	ca.	41 kg

Greiner GmbH

Riedbachstraße 5 D-74385 Ploersheim
Phone +49-7144-8112-0 Fax +49-7144-8112-99
info@greiner-gmbh.de www.greiner-gmbh.de





GREINER

sita

WE DESIGN QUALITY

sita
Variationsliege
variation Lounger

medbest
made in Germany

sita

Variationsliege
variation lounge

sita hat eine klare, funktionale Formgebung, die keine Fragen bezüglich der Bedienung offen lässt. Wird der rechtsseitig angebrachte Bedienehebel nach hinten gezogen, entriegelt die Mechanik die Rückenlehne und sie kann stufenlos gegen den Widerstand einer Gasdruckfeder bis zur völligen Waagerechten bewegt werden. Bei Entlastung richtet sich die Rückenlehne selbständig wieder auf. Hebelstellung nach vorne reguliert die Beinablage, die ebenfalls durch eine Gasdruckfeder unterstützt ist.

sita 4490200
fahrbare Version (mit Rollen und Schubbügel)
mobile version (with castors and handle)



The clear and functional design of **sita** makes its use very easy. When pulling the control lever, which is fixed on the right side of the chair, backwards, the backrest can, with the help of a gas spring, steplessly be adjusted up to a fully flat position. With the release of the control lever, the backrest automatically moves back. By pushing the control lever forward the legrest can be adjusted, also supported by a gas spring.

Groß dimensionierte Polsterflächen, die verschiebbare, integrierte Nackenrolle und die gepolsterten Armauflagen sorgen für hohen Komfort in jeder Position der Liege – die Seitenteile bieten gleichzeitig Schutz gegen Herausfallen. Das robuste Untergestell aus beschichtetem Stahl verfügt in der fahrbaren Version über vier einzelgebremste, total feststellbare Doppelrollen (ø 100 mm). Mit dem **sita** Zubehörprogramm (Rückseite) kann die Liege praxisnah ausgerüstet werden.



sita 4490000
 Standversion (ohne Rollen und Schubbügel)
 stationary version (without castors and handle)



sita 4490200
 in Liegeposition
 horizontal position

Large cushions, the integrated movable bolster as well as the upholstered armrests provide a highly comfortable seating of the patient in every chair position – in addition the side parts avoid the patient falling off the chair. Mobile **sita** chairs have a sturdy frame of coated steel with four double castors (ø 100 mm) that can individually be locked. With the **sita** accessories the chair can be equipped according to one's requirements.

Varianten fahrbare Version Standversion
options mobile version stationary version



Art. Nr. p/n

4490200

4490000